



**MICRONEEDLING
PROFESSIONNEL**
Une peau Zero Défaut

CAMPOMATS
TNEED
pro

WWW.CID-GROUP.BE

FR



CAMPOMATS
1NEED
pro

LE FLEURON DU STYLO DERMATOLOGIQUE

1NEED® PRO by CAMPOMATS est la toute dernière innovation en matière de stylo dermatologique dédié au soin de microneedling.

Ce dispositif fabriqué en Europe permet de délivrer des soins de microneedling d'une qualité exceptionnelle et élaborés pour répondre à la demande grandissante des traitements anti-âge dans le domaine esthétique.

L'appareil de microneedling 1NEED® Pro by Campomats a été spécialement conçu pour une utilisation professionnelle dans le respect des mesures d'hygiène médicale.

Grâce à ses 4 cartouches de soin, le stylo dermatologique offre un large éventail d'indications - du microneedling cosmétique ou médical, au microneedling esthétique et au nanopeeling.



CE 1370

UN SEUL DISPOSITIF POUR DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE TRAITEMENT

Grâce à sa pièce à main en aluminium argal, à son design ergonomique, compact et à son faible poids, l'appareil offre une prise en main optimale, même pendant les traitements longs, et dispose d'une batterie au lithium de longue durée.

Pendant le traitement, il est possible de choisir entre **six vitesses d'oscillation différentes** et une **profondeur de travail allant jusqu'à 2,5 mm** pour adapter le traitement de manière optimale aux conditions de la peau.

POUR QUELLES INDICATIONS ?

- Pénétration intradermique de principes actifs (Acide hyaluronique, vitamines...)
- Raffermissment et rajeunissement de la peau (rides et ridules estompées)
- Stimulation du renouvellement cellulaire et de la production de collagène
- Lissage des imperfections
- Uniformisation et enluminement du teint
- Cicatrices d'acné, acnéomes et autres hyperpigmentations de la peau
- Aplatissement des cicatrices bombées et des chéloïdes
- Traitement des vergetures, volumateur dermique
- Fortification et densification capillaire
- Ralentissement de la chute des cheveux



□ FORTIFICATION DES
CHEVEUX

□ RIDES, RIDULES

□ VOLUME, NUTRITION

□ ACNÉ, PORES DILATÉS

□ PEAU UNIFORMISÉE
TACHES PIGMENTAIRES

□ CICATRICES D'ACNÉ

□ RAFFERMISSEMENT

UN DISPOSITIF, 4 TECHNIQUES DE TRAITEMENT UNE SÉCURITÉ OPTIMALE



SYSTEME EASYLOCK + NO FLOW

Grâce au système **EASYLOCK**, le stylo pour la peau 1NEED® Pro assure un maintien sécurisé des cartouches utilisées, même lors de traitements intensifs. Ces cartouches sont également brevetées du système **NOFLOW**® évitant toute contamination entre la surface cutanée et le stylo dermatologique. Selon l'application, quatre types de cartouches à usage unique et stériles sont disponibles pour assurer des conditions de traitement optimales.



1 - CARTOUCHE MICRONEEDLING

Cartouche indiquée pour les traitements médicaux par micro-aiguilles.

La cartouche Microneedling a été développée pour la stimulation épidermique **invasive avec saignement** et rupture des fibroblastes pour un rajeunissement cutané intense. Son design spécial avec 9 aiguilles d'une longueur maximale de 2,5 mm rend le traitement médical efficace et durable.

Idéal pour les traitements de resurfacing profond, sur les cicatrices et séquelles d'acné ou pour les rides marquées.



9MN 0.18

2 - CARTOUCHE MICROPRICKING

Cartouche indiquée pour les traitements doux par aiguilles **sans saignement**.

La cartouche micropricking a été développée pour une stimulation **non invasive** de l'épiderme et un rajeunissement doux de la peau. Son design spécial avec 9 aiguilles d'une longueur maximale de 0,3 mm, rend le traitement esthétique efficace et sûr.

Idéal pour la mésothérapie, le resurfacing léger ou en combinaison avec des protocoles contenant des substances actives de biostimulation.



9MP 0.18

3 - CARTOUCHE NANOPEELING

Cartouche indiquée pour la **microdermabrasion** et les traitements de gommage profond. La cartouche Nanopeeling de 130 nano-points ronds a été développée pour un nettoyage intense de l'épiderme et s'utilise en combinaison avec des peelings et des substances exfoliantes actives.



130AN

4 - CARTOUCHE ACNE SCARS

Cartouche spécialisée conçue pour cibler et améliorer les cicatrices d'acné atrophiques grâce à une approche mono-aiguille d'une profondeur réglable de 0 à 2,5 mm.

Sa conception mono-aiguille cible directement les cicatrices individuelles, optimisant les résultats en traitant chaque imperfection avec précision.

Cette procédure est **mini-invasive et utilise une technique de subcision contrôlée** qui détruit les fibres fibreuses sans endommager excessivement les tissus, réduisant ainsi le temps d'éviction tout en améliorant efficacement l'apparence des cicatrices.



1PM-0.20

Les cartouches sont disponibles sur www.acme.shop

1NEED *pro*



1NEED® pro se compose d'une pièce à main de conception ergonomique en aluminium Argal, d'un support très utile en métal noir et d'un bloc d'alimentation CE.

ECRAN NUMÉRIQUE

Six vitesses de traitements sont disponibles et contrôlables via l'écran numérique : 108, 111, 115, 119, 121 et 126 coups/seconde .

MALETTE DE TRANSPORT

La pièce à main et les accessoires sont contenus dans un élégant coffret en aluminium noir.

Grâce à sa petite taille et sa malette de transport, 1NEED® pro est l'outil parfait et adapté aux petits espaces et au travail à domicile.

BATTERIE

Grâce à sa batterie Lithium rechargeable, l'appareil peut être utilisé soit sans fil ou pendant le chargement avec un câble.

UNE GAMME DE PRODUITS DÉDIÉS **FUSION** MESO

Fusion Meso est une marque de médecine esthétique disponible dans plus de 61 pays et 15 000 centres dans le monde. L'assortiment de produits est divisé en flacons stériles et en soins de la peau pour les pré et post-traitements micro-needling. Les flacons stériles de Fusion Meso ont été spécifiquement formulés et sont fabriqués selon les normes de l'industrie pharmaceutique.

DÉCOUVREZ LES SÉRUMS :

- **F-XFC+** : Revitalisation, nutrition & anti-âge
 - **F-BTX** : Prolongation Botox, anti-rides & volumateur
 - **F-LIFT+ FACE** : Lifte, raffermi la peau, anti-âge & volumateur
 - **F-EXOSOMES** : Raffermi, tonifie, éclat, volumateur, répare & anti-âge
 - **F-HA** : Hydratant intense, volumateur, comblement rides & ridules
 - **F-HA GLOW** : Hydratant, volumateur, réduit la pigmentation & anti-âge
 - **F-MELACLEAR** : Traitement du mélasma & réduit les taches localisées
 - **F-GLOW LIFT** : Lifte, raffermi, réduit la pigmentation & uniformise le teint
 - **F-ACN** : Réduit l'acné, peaux grasses, pores ouverts, rougeurs & l'inflammation
 - **F-HAIR** : Revitalisation, fortification capillaire & réduit la chute des cheveux
- ...et les autres produits et accessoires Fusion Meso sur www.acme.shop



LE SAVIEZ-VOUS?

LE MICRONEEDLING ET LE MICROPRICKING

Le microneedling et le micropricking font tous deux partie des traitements les plus appréciés dans les centres cosmétiques et les cabinets médicaux de dermatologie, car leur effet sur les troubles cutanés les plus divers est énorme. L'efficacité du traitement est particulièrement évidente pour le traitement des cicatrices d'acné, des chéloïdes, des vergetures, mais aussi pour le rajeunissement de la peau.


Le microneedling est une thérapie d'induction percutanée du collagène, au cours de laquelle la surface de la peau est perforée par des aiguilles très fines à l'aide d'un stylo cutané. Il est ainsi possible de faire pénétrer de précieux principes actifs plus profondément dans la peau et de stimuler le renouvellement cutané. Il est possible d'adapter l'intensité à l'état de la peau. On distingue les trois applications suivantes : le microneedling cosmétique, dermatologique et chirurgical. Elles se distinguent spécialement par la profondeur de pénétration réglée des aiguilles et par leur indication. Alors que le needling cosmétique (micropricking) est plutôt utilisé pour faire pénétrer des substances actives dans la peau et affiner le grain de peau, le needling médical et le needling chirurgical font partie des variantes plus intensives et sont principalement utilisés pour le traitement des cicatrices et le raffermissement de la peau.

POUR QUELS RÉSULTATS?

Taches pigmentaires



NANOPEELING

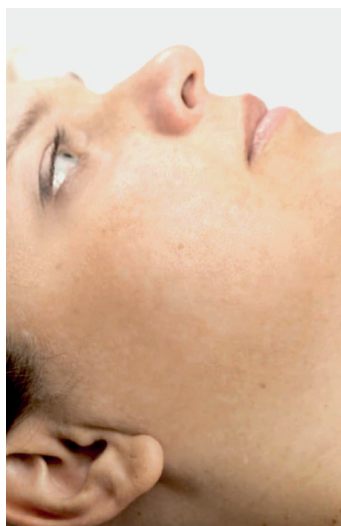

Séquelles d'acné



MICROPRICKING



Anti-âge



MICRONEEDLING



INEED

pro

Vitiligo



MICRONEEDLING



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1NEED

pro



certification IIb

CE 1370

1NEED® by Compomats	
Composition	1 stylo dermatologique en Aluminium Argal
Alimentation	Batterie Lithium rechargeable 5V
Vitesses	6 vitesses réglables : 108, 111, 115, 119, 121 et 126 coups/seconde
Profondeur	Double Bague de réglage : 0-2,5mm et 0-0,3mm
Écran	digital numérique
Accessoires	socle métal, malette de transport
Alimentation	100-240V : 50-60Hz : 0,3A
Dimensions	Stylo : 165mm x 30mm Malette : 215mm x 215mm x 105mm


Cartouches de traitement individuelles stériles

Variante	MICRONEEDLING 9MN 0,18	MICROPRICKING 9MP 0,18	NANOPEELING 130 AN	ACNE SCARS 1PM-0.20
Profondeur	0,15 à 2,5 mm	0,15-0,3 mm	-	0,15-0,25 mm
Indication	Pour les traitements de microneedling invasifs avec saignement	Pour les traitements de resurfacing ou de mesothérapie sans saignement	Pour la microdermabrasion et le peeling profond	Pour le traitement des cicatrices et vergetures

FORMATION

Une formation sur le dispositif et les produits vous sera dispensée par notre formatrice agréée. Cette formation est validée par un certificat reconnu par le public et les compagnies d'assurances.

Notre formatrice se tient à votre disposition sur rendez-vous dans notre showroom afin de répondre à vos questions ou de vous proposer une session de formation complémentaire.

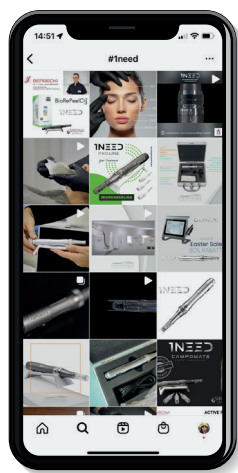

COMMUNICATION

Votre dispositif vous sera livré avec une Affiche et ses flyers clients.

Retrouvez toutes les actualités sur nos réseaux sociaux facebook et Instagram et faites parler de vous et de votre expérience avec le 1NEED® #1need



@cidgroup.be

CAMPOMATS
TNEED



pro



FUSION
MESO



Catalogue & formation produits fournis

Découvrez notre gamme complète sur WWW.CID-GROUP.BE



CID GROUP
TECHNOLOGIES ESTHÉTIQUES

**EQUIPEZ-VOUS ET FORMEZ-VOUS AVEC NOUS
AUX TECHNOLOGIES ESTHÉTIQUES**

L'efficacité d'un concept global
Un accompagnement professionnel d'experts
Une équipe dynamique et réactive basée en Belgique
Des produits novateurs alliant performance et simplicité d'utilisation
Un programme de formations adapté à votre évolution
Des outils de communication pour développer votre activité

Chaussée d'Alsemberg, 842
1180 Uccle - BELGIQUE
tél : +32(0)2/374.03.39
mail : contact@cid-group.be

WWW.CID-GROUP.BE



[@cidgroup.be](https://www.instagram.com/cidgroup.be)

**ACME
SHOP**
CONSOMMABLES ESTHÉTIQUES

Produits en vente sur
WWW.ACME.SHOP